

DSPI (DIGITAL SPECKLE PATTERN INTERFEROMETRY)

Introducción

Las *pruebas ópticas no destructivas* permiten detectar cambios de diferente índole en toda la superficie de un objeto bajo análisis, esto sin hacer contacto físico alguno que pudiera interferir en su integridad sin afectar el estado de comportamiento que se quiera analizar. Para llevar a cabo dichas pruebas se han desarrollado diferentes *metodologías*, que aparte de ser no invasivas, son de campo completo capaces de proveer información cualitativa y cuantitativa de la forma y deformación de aquellos objetos sujetos a una variedad de estímulos.

En esta práctica se plantea el uso de la técnica de interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI por sus siglas en inglés: Electrónica Speckle Pattern Interferometry) en tiempo cuasi real para obtener información cualitativa de un objeto que se deforma a partir de sus modos de vibración generados mediante perturbación de ondas acústicas. La implementación práctica de dicha técnica permitirá obtener patrones de franjas tanto en pruebas llevadas a cabo en modo estático como en modo dinámico.

Esta practica explica el concepto de interferencia entre dos hologramas digitales y su potencial para hacer mediciones; en particular se estudia la resonancia de una muestra metálica. Se hacen mediciones de distintas **audio-frecuencias** a las que el metal alcanza su máxima deformación (modos de vibración) mediante la implementación de un arreglo interferométrico (ESPI). Los experimentos se llevan a cabo con el equipo, instrumentos y medidas de seguridad vigentes en el Laboratorio de Metrología 1 y donde especialistas en el área llevan a cabo sus investigaciones.

Objetivos

-Realizar experimentos sencillos que conduzcan a entender aquellos principios básicos de la **tecnología de punta** referente a pruebas ópticas no destructivas (deformaciones, resonancias), empleando luz Láser.

Material y equipo

1. Laser verde Nd: YAG
3. Cámara CCD
4. 2 Cubos divisor de haz
5. 2 Fibras ópticas mono-modales
6. 2 Lentes
7. 2 Objetivos de microscopio con monturas de ajuste XYZ
8. Diafragma de iris
9. Objeto de prueba
10. Monturas mecánicas para las componentes
11. Bocina
12. Generador de funciones
13. Amplificador

Procedimiento

EXPERIMENTO 1. Arme el arreglo experimental (interferómetro fuera de plano) mostrado en la figura 1. Use un programa especial para correlacionar hologramas y así encontrar los patrones de vibraciones del objeto de prueba.

- i) Primeramente, realice el enfoque nítidamente del objeto de prueba con luz blanca.
- ii) Obtenga patrones de franjas para una placa de aluminio sometida primero a una carga estática y luego a una onda senoidal.
- iii) Para el objeto de prueba, realice el barrido de la frecuencia de excitación de 100Hz a 15 kHz aplicando un estímulo acústico (onda senoidal).
- iv) Con ayuda del programa, busque las regiones de alta respuesta (donde resalten los modos de vibración) y encuentre las bandas de frecuencia locales para la máxima densidad de franjas. El programa graba una imagen inicial (holograma) o imagen de referencia de la muestra bajo estudio que es comparada con las imágenes subsecuentes en distintas posiciones. La comparación es usualmente hecha por la substracción de las imágenes subsecuentes con la imagen inicial, tomada como referencia. El resultado, mostrado en el monitor en forma de patrones de interferencia, caracteriza la posición del objeto, i.e., la franjas describen el desplazamiento del objeto.

- v) Una vez identificado las regiones de alta respuesta, escoja al menos 3 modos de vibración para la muestra y complete la tabla 1. Los patrones de vibración muestran el comportamiento del objeto en condiciones normales sujeto a un estímulo acústico.
- vi) Grabe una serie de hologramas consecutivos para cada modo de vibración elegido.
- vii) Escriba un programa que lea los hologramas y los compare mediante la substracción de los mismos y presente los patrones de franjas de interferencia resultantes.
- viii)

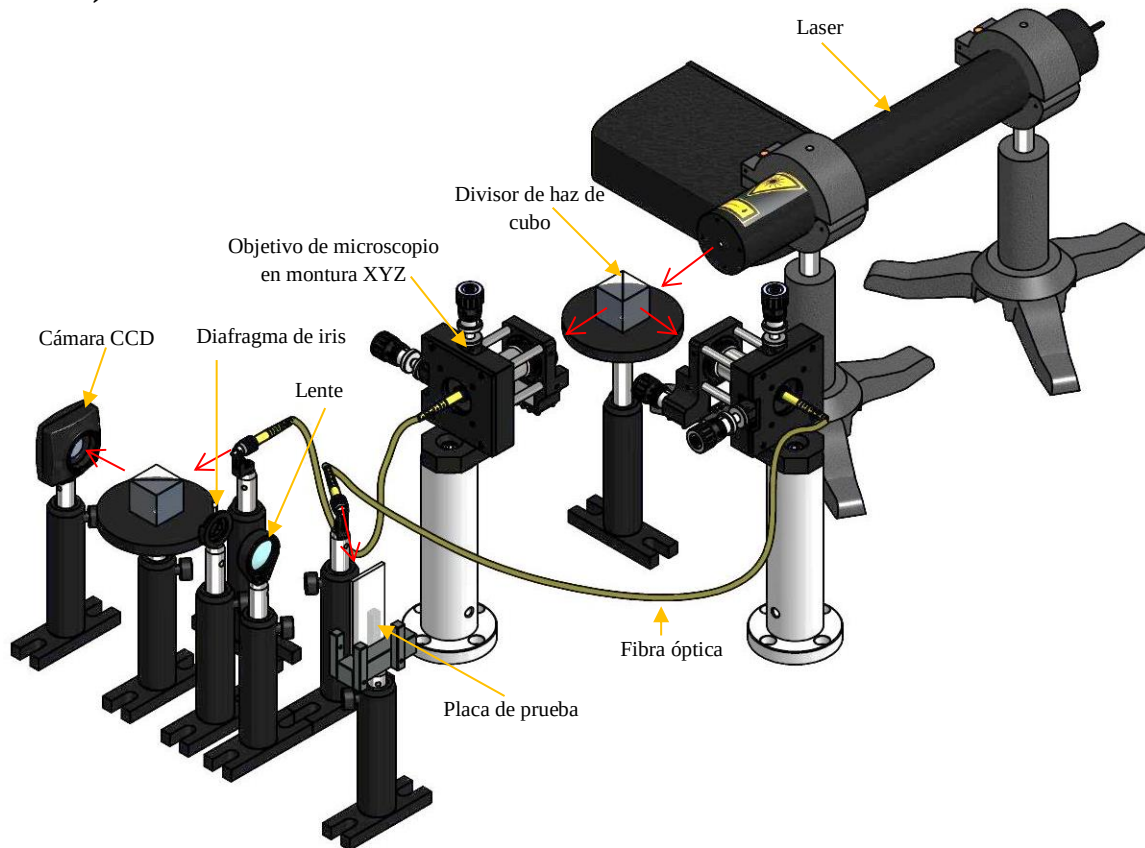


Figura 1. Arreglo interferométrico ESPI/HDI.

Resultados

Patrones de resonancia encontrados (Modos)			
Modo	Frecuencia de excitación y voltaje aplicado	Patrón de intensidad	Observaciones

Tabla 1. Resultados

Cuestionario

- 1.- A parte de ESPI, mencione y describa brevemente otras técnicas de medición no invasivas
- 2.- ¿A qué se refiere cuando se habla de obtener la fase de un objeto deformado?
- 3.- Desarrolle el método que usó para obtener la fase del objeto deformado a partir del patrón de franjas. Mencione métodos alternos.
- 4.- ¿Qué consideraciones se deben tener para que exista condición de interferencia entre un holograma del objeto en su posición inicial o en referencia y un holograma del objeto deformado? Suponga que estos hologramas son dos patrones de moteado vistos en práctica.

Bibliografía

1. Handbook of Holographic Interferometry. Thomas Kreis. Wiley-Vch
2. Holographic and Speckle Interferometry. R. Jones & C. Wykes. Cambridge University Press
3. Full Field Optical Metrology and Applications. Fernando Mendoza-Santoyo, et. Al. IOP books

Formato del Informe

1. Hoja de presentación que contenga principalmente: Título, autores y fecha
2. Texto
 - Resumen de entre 20 y 100 palabras (sugerencia: hacerlo al final). Debe describir con brevedad lo que se realizó.
 - Introducción.
 - Procedimiento y Resultados
3. Cuestionario
4. Conclusiones